

Kaye报告工具1.5版本 (CRT 1.5)

通过专用工具创建KAYE VALIDATOR[®] AVS
和VALPROBE[®] RT报告



报告工具软件是一款综合性的报告工具，可安装在独立的Windows PC或Kaye验证操作控制台上。它可从Kaye Validator AVS或ValProbe RT验证文件中创建报告，以记录验证结果。

报告工具被无缝集成到验证控制台软件中。在Kaye Validator AVS或ValProbe RT控制台上创建并存储在控制台或共享网络上的验证文件，也可通过同步输出功能传输到装有报告工具软件的电脑上并创建报告。


可在独立的电脑上离线创建报告的功能使得Kaye验证控制台的灵活性和效率大大提高。所有文件都经过加密和防篡改处理，只有报告工具软件才能访问，这确保了与验证控制台相同的数据完整性，并且在办公室就能便捷地进行操作。显示界面映射出Kaye验证控制台的专利资产中心理念，确保了用户的无缝过渡。报告工具软件支持Microsoft的Active Directory*。

Active Directory可为用户分配适当的权限和访问权，从而简化用户管理。您可以在Kaye网站上下载30天的免费试用版。还可以购买基础许可证，查看和管理报告数据。


特性

- 合并Validator AVS和ValProbe RT验证报告
- 可为AVS和ValProbe RT验证文件生成IEC和FD X报告
- 插件报告功能允许导入自定义报告模板
- 导出到专用网络驱动器，便于无纸化集成
- 您在办公室或家里就可以方便地查看Validator AVS或ValProbe RT系统中的数据并创建报告

- 在安全的网络或服务服务器上读取、管理和存储数据，方便访问文件
- 最多可将三份Kaye Validator AVS或三份ValProbe RT验证报告合并为一份报告
- 详细的合格/失败报告，包括验证失败的信息
- 符合AFNOR FD X15-140或IEC 60068 ValProbe RT规范文件的气候室和恒温箱报告
- 加密和防篡改的文件只能通过报告工具软件读取，确保数据完整性
- 与Microsoft的Active Directory集成，确保无缝、便捷的用户管理

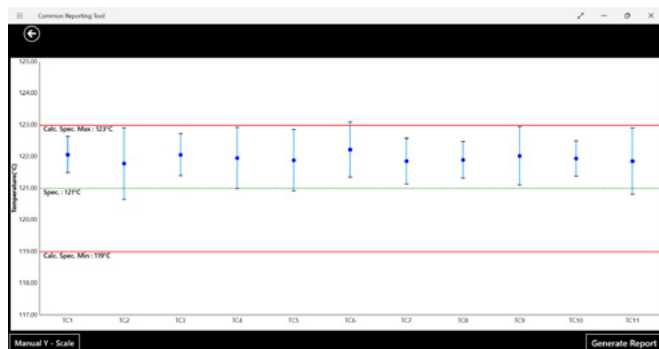

FD X15-140曲线图报告

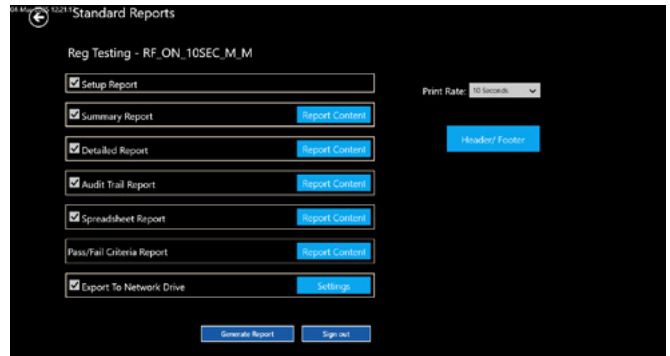

标准报告

Kaye 代表联系方式:

样机申请:

中国
安费诺（常州）连接系统有限公司
江苏省常州市武进高新技术开发区
西湖路8号津通工业园10A厂房，213164
T: 0086-519-83055197
Email: kaye-china@amphenol-sensors.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA AND ASIA
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
Sinsheimer Strasse 6
D-75179 Pforzheim
T: +49 (0) 7231-14 335 0
F: +49 (0) 7231-14335 29
Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA/AMERICAS
Amphenol Thermometrics, Inc.
967 Windfall Road
St. Marys, PA 15857
T: +1(814) 834-9140
F: +1(814) 781-7969
Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

INDIA
Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
MAHAVEER TECHNO PARK
Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
Telangana – 500081 | T: +91 40 33147100
Email: kaye-india@amphenol-sensors.com



免责声明：文件中的信息是基于我们目前的测试、知识和经验的结果。由于产品应用中可能产生的影响，建议您自行测试、检查及追踪。某个产品或产品的某项性能只适用于当前测试环境，不能保证适用于所有环境或永久适用。因此，法律允许范围内免除责任。任何第三方专利或现行法律法规，必须由用户自己遵守并自行承担。任何第三方专利或现行法律法规，必须由用户自己遵守并自行承担。

© 2025 Amphenol Corporation. 版权归Amphenol公司所有。规格如有变动，恕不另行通知，文件中所提的其他公司名称或产品名称均为其所有者的商标或注册商标。